



[mantisitalia.it](http://mantisitalia.it)

**Excellence**  
in Beauty



# La doppia azione dell'**ultrasuono** abbinato alla **mesoporazione**

Gli studi e la ricerca continua verso nuove tecnologie performanti e all'avanguardia in campo estetico e medico estetico, hanno portato gli ingegneri MANTIS a unire le riconosciute proprietà dell'**ultrasuono** al **potere di veicolazione della mesoporazione** (mesoterapia non invasiva in totale assenza di aghi), per realizzare un'apparecchiatura unica nel suo genere che agisce con due azioni contemporaneamente: **ultrasuono + mesoporazione** per un'eccellente B•FORMANCE.



100%  
MADE IN ITALY

I manipoli combinano  
mesoporazione e ultrasuoni,  
riducendo i tempi di trattamento  
e aumentando l'efficacia  
delle due azioni.





# I Manipoli

**I due manipoli viso e corpo permettono di trattare zone differenti e di veicolare i principi attivi contenuti nei prodotti utilizzati durante il trattamento.**

La vera innovazione di B•FORMANCE, però, consiste nella capacità di entrambi i manipoli di veicolare sia sieri che creme.

**Il manipolo viso**, dal diametro di 28 mm, consente di agire anche nelle zone più piccole, trattando così gli inestetismi del contorno occhi e del contorno labbra. La sua forma ergonomica lo rende maneggevole e facile all'uso.

**Il manipolo corpo**, il cui diametro misura 60 mm, è di dimensioni maggiori rispetto al manipolo viso e permette di trattare in maniera precisa e rapida le zone più ampie. La sua peculiare forma arrotondata lo rende scorrevole e la sua impugnatura fa sì che il manipolo sia particolarmente maneggevole.



## Mesoporazione

Una nuova metodica parenterale non invasiva che consente di veicolare i principi attivi di sieri e creme in profondità. Grazie a una serie di lievi impulsi elettrici, infatti, vengono aperti i "canali" (elettropori) delle strutture tissutali, attivando quelle correnti di liquido interstiziale ed intracellulare che permettono di veicolare transdermicamente e in tempi rapidi le sostanze dei prodotti utilizzati durante il trattamento per ottenere i risultati desiderati.



## Ultrasuoni

Onde ad alta frequenza la cui cessione di energia viene convertita in calore che possiede riconosciute proprietà terapeutiche. Si tratta di una sollecitazione meccanica che produce il movimento delle molecole tissutali, inducendo variazioni di pressione che consentono di muovere il liquido all'interno dei tessuti biologici e di riallineare le fibre di collagene. Sono molti gli ambiti di utilizzo degli ultrasuoni, tra cui terapeutico ed estetico.





# Dove agisce B•FORMANCE

Gli ultrasuoni rafforzati dall'efficace potere veicolante della mesoporazione danno vita a un'innovativa apparecchiatura per la medicina estetica e l'estetica professionale: B•FORMANCE. L'azione dei principi attivi veicolati durante il trattamento è pertanto amplificata, garantendo risultati immediati.

rughe

occhiaie

borse

discromie cutanee

atonia

riduzione delle  
circonferenze

adiposità localizzate

rimodellamento  
e tonificazione

inestetismi  
della cellulite

linfodrenaggio

smagliature

rassodamento glutei



## VISO

B•FORMANCE per il viso è indicata per contrastare pelle disidratata, assottigliata e per combattere i segni del tempo e del foto invecchiamento, come rughe e macchie. Ottimi sono anche i risultati ottenuti nel trattamento della pelle atona, che causa "svuotamenti" e cedimenti dell'ovale del viso.

### TRATTAMENTI:

- Antiage
- Tonificante e rimpolpante
- Total face



## CORPO

B•FORMANCE per il corpo riduce l'effetto "a buccia d'arancia" e migliora inestetismi come cedimenti e lassità cutanee. Riduce visibilmente, fin dal primo trattamento, i pannicoli adiposi, tonifica e dona elasticità alla pelle, attenua le smagliature di recente formazione e stimola l'azione drenante.

### TRATTAMENTI:

- Body shaping per fianchi, addome e glutei
- Tonificante per braccia, gambe e glutei
- Total body



## Assistenza tecnica **da remoto**

Mantis garantisce su tutti i suoi dispositivi un supporto tecnico a distanza, attraverso la connessione internet, per un intervento costante ed efficace.

# I nostri **risultati** sono i vostri **successi!**

**I trattamenti B•FORMANCE viso e corpo** hanno dimostrato, sin dalle prime sedute, risultati strabilianti e costanti nel tempo. La silhouette del corpo risulta definita, come scolpita e rimodellata, i tessuti tonificati e riossigenati. Sul volto, i volumi appaiono ricompattati e riposizionati, le rughe attenuate, la texture della pelle visibilmente migliorata, riossigenata e tonica.

**Performance straordinarie e visibili fin dal primo trattamento con un'unica tecnologia.**

**Solo 25 minuti**  
per ritrovare la tua naturale bellezza.

Prima



Dopo\*



Prima



Dopo\*




Prima



Dopo\*



Prima

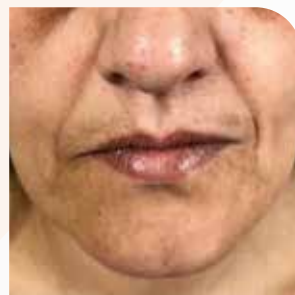

Dopo\*



## CARATTERISTICHE TECNICHE



	Dimensioni	Materiale	Lunghezza Utile
<b>Manipolo Viso</b>	Diam. 28mm	AISI 304	300mm
<b>Manipolo Corpo</b>	Diam. 60mm	AISI 304	300mm
<b>Piastra conduttiva</b>	200x150mm	AISI 304	300mm

Condizioni ambientali di	Funzionamento		
	Temperatura	°C	10-35
Umidità relativa	%UR	10-70	
Pressione atm.	hPa	800-1060	
Trasporto e/o stoccaggio			
Temperatura	°C	-20-55	
Umidità relativa	%UR	10-98	
Pressione atm.	hPa	800-1060	

### Guida operatore (Display)

10" LCD touch screen resistivo

### Classe di protezione pericoli elettrici

I

### Parte applicata tipo

BF

### Alimentazione

110 -240 VAC 50/60 Hz

### Potenza massima assorbita

200 VA

### Fusibile

1x2A 250V

### Tensione massima generatore

Da 0V a 50V

### Frequenza portante variabile

da 500Hz a 2KHz

### Frequenza di picco

0.6 Hz

### Massima corrente erogata

Da 0,5mA a 5mA con protezione e controllo integrato

### Corrente di stimolazione massima

1.5 mA/cm<sup>2</sup>

### Tensione massima generatore

Da 0V a 50V

### Frequenza modulata

1 Mhz

### Massima densità potenza erogata


1,5 W/cm<sup>2</sup>

### Dimensioni

55 x 40 x 46 cm

### Peso netto

14 Kg

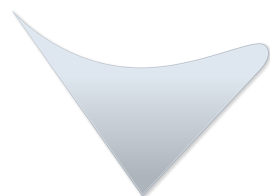

**MANTIS**


SCIENCE & TECHNOLOGY



### Mantis Srl

Via Artigianale Croce, 13  
42035 Castelnovo ne' Monti (RE) - Italy  
Tel +39 0522 612080  
Fax +39 0522 729796  
info@mantisitalia.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO



mantisitalia.it

