



mantisitalia.it

Excellence
in Beauty



L'elettroporatore in grado di veicolare cosmetici e cosmeceutici

La continua ricerca verso nuove tecnologie sempre più performanti in campo estetico e medico estetico ha portato gli ingegneri Mantis alla realizzazione di ESSENTIAL, l'elettroporatore in grado di veicolare transdermicamente cosmetici e cosmeceutici con texture cremose e sieri, sfruttando le proprietà elettriche del tessuto connettivo.

I manipoli

I suoi due speciali manipoli VISO e CORPO, permettono di trattare ogni zona, anche le superfici più piccole.

Il manipolo VISO, dal diametro di 28 mm, consente di trattare in maniera efficace gli inestetismi presenti anche nelle aree più piccole del volto, come contorno occhi e contorno labbra. La sua forma ergonomica lo rende particolarmente maneggevole e facile all'uso.

Il manipolo CORPO, dal diametro di 60 mm, permette di trattare in maniera precisa e funzionale le aree più ampie del corpo in tempi brevi. La sua particolare forma arrotondata, inoltre, lo rende particolarmente scorrevole.

La facile e sicura impugnatura fa sì che il manipolo corpo sia piacevole da utilizzare anche per lunghi periodi.





Elettroporazione

Una nuova metodica parenterale non invasiva che consente di veicolare i principi attivi di sieri e creme in profondità. Grazie a una serie di lievi impulsi elettrici, infatti, vengono aperti i "canali" (elettropori) delle strutture tissutali, attivando quelle correnti di liquido interstiziale ed intracellulare che permettono di veicolare transdermicamente le sostanze dei prodotti utilizzati durante il trattamento per ottenere i risultati desiderati.



Dove agisce ESSENTIAL



VISO

È indicata per trattare pelle disidratata, assottigliata, che presenta segni del tempo o dovuti al foto invecchiamento, come rughe e macchie.

TRATTAMENTI:

- Antiage
- Tonificante e rimpolpante
- Ridefinizione contorno viso



CORPO

È indicata per trattare cedimenti, lassità cutanee e "buccia d'arancia". Riduce visibilmente, fin dal primo trattamento, i pannicoli adiposi, tonifica e dona elasticità alla pelle. Attenua inoltre le smagliature di recente formazione, potenzia la massa muscolare e svolge un'azione drenante.

TRATTAMENTI:

- Body shaping
- Tonificante
- Slimming

.....
rughe

.....
occhiaie

.....
borse

.....
discromie cutanee

.....
atonìa

.....
riduzione delle
circonferenze

.....
adiposità localizzate

.....
rimodellamento
e tonificazione

.....
inestetismi
della cellulite

.....
linfodrenaggio

.....
smagliature

.....
rassodamento glutei

Facile e intuitivo

Il software di ESSENTIAL permette di effettuare trattamenti VISO e CORPO già preimpostati, accompagnati da immagini illustrative, divisi per zona e inestetismo e con semplici protocolli d'uso.



Assistenza tecnica **da remoto**

Mantis garantisce su tutti i suoi dispositivi un supporto tecnico a distanza, attraverso la connessione internet, per un intervento costante ed efficace.

I nostri **risultati** sono i vostri **successi!**

I trattamenti ESSENTIAL viso e corpo hanno dimostrato, sin dalle prime sedute, risultati strabilianti e costanti nel tempo. La silhouette del corpo risulta definita, come scolpita e rimodellata, i tessuti tonificati e riossigenati. Sul volto, i volumi appaiono ricompattati e riposizionati, le rughe attenuate, la texture della pelle visibilmente migliorata, riossigenata e tonica.

Prima



Dopo*



Prima



Dopo*



*Risultato ottenuto dopo 1 trattamento ESSENTIAL

CARATTERISTICHE TECNICHE



Guida operatore (Display)

10,4 LCD touch screen

Classe di protezione pericoli elettrici

I

Parte applicata tipo

BF

Alimentazione

230 VAC 50/60 Hz

Potenza massima assorbita

40 VA

Fusibile

1x2A F5x20 250V

Dimensioni

55 cm x 40 cm x H. 46 cm

Peso apparecchiatura (dotazione inclusa)

~ 14 Kg

Generatore Elettroporatore

Tensione massima generatore

Da 0V a 50V

Frequenza portante variabile

Da 1KHz a 2KHz

Frequenza di picco


0,6 Hz

Massima corrente erogata

Da 0,5 mA a 5mA con protezione a controllo integrato

Corrente di stimolazione massima

1.5 mmA cmq

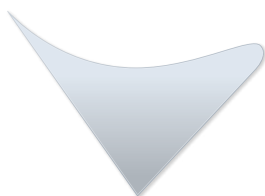

MANTIS


SCIENCE & TECHNOLOGY



Mantis Srl

Via Artigianale Croce, 13
42035 Castelnovo ne' Monti (RE) - Italy
Tel +39 0522 612080
Fax +39 0522 729796
info@mantisitalia.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO



mantisitalia.it

